




# PINCE A ROULEAUX

pour vider ("stripper"), sceller et couper tuyaux en pvc médicales



- Système manuel pour sceller, égoutter et couper un tuyau en PVC
- Utilisation prévue: vidange des tubes (« strippage »), déformation des bagues d'aluminium qui scellent les tuyaux en PVC et coupage de ces tuyaux
- Non stérile
- Poignée anatomique, en plastique anti-glisse
- Présence d'un ressort de retour automatique à la position de repos, afin de réduire la fatigue de la main de l'opérateur
- Pour clips rondes et rectangulaires
- Rouleaux pour strippage autolubrifiants
- Simple stérilisation par rayons UV, ou par détergents et désinfectants non agressifs sur les métaux (ne pas utiliser d'hypochlorite de sodium)
- Forme ronde des anneaux, sans positions forcées, qui favorise et accélère l'insertion des tubes
- Effort de déformation extrêmement réduit sur les tubes de transfusion en PVC

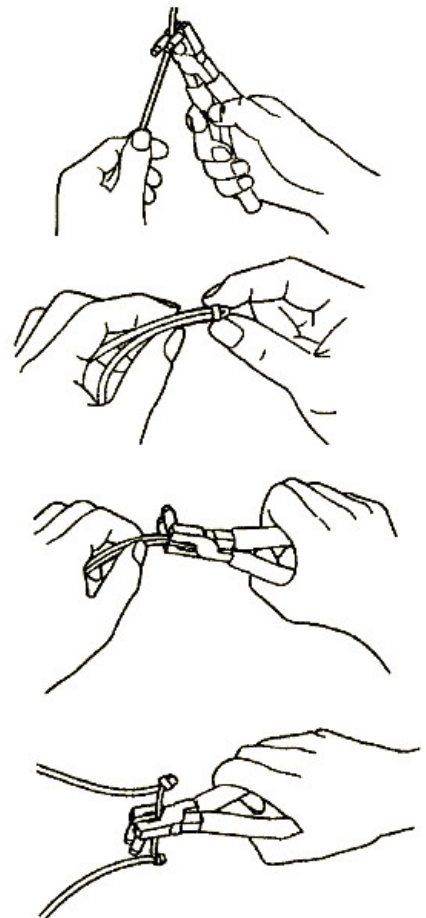

ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

