



EST-302

Table d'opération
manuelle-hydraulique



BLOC OPERATOIRE



EST-302

Table d'opération manuelle hydraulique



La table hydraulique manuelle EST-302 est adaptée aux procédures chirurgicales de la tête, du cou, du thorax, de l'abdomen, du périnée et des extrémités, ainsi que pour la neurochirurgie, la cardiologie, la gynécologie, l'urologie, la proctologie, l'oto-laryngologie, l'orthopédie et autres. La surface de la table d'opération est facile à nettoyer et résistante aux agents désinfectants. Le sommier est en plastique très résistante et peut se déplacer de l'arrière vers l'avant. La table peut être relevée ou abaissée au moyen d'une pompe hydraulique à huile commandée par pied. Le décalage longitudinal du sommier pour le bras à C est exécuté manuellement, en outre, le sommier est translucide aux rayons X, ce qui permet de prendre des radiographies et de surveiller le patient avec un bras à C. La section des jambes peut être tournée, ouverte, démontée et réglée facilement. Différentes positions peuvent être contrôlées à partir des deux côtés. Le cadre est recouvert d'acier inoxydable à l'intérieur et à l'extérieur.



Caractéristiques Techniques

Dimension de la table

Longueur totale	2150mm
Largeur	550mm

Dimensions des sections

Section tête	250×500 mm
Section dos	465×500 mm
Section siège	450×500 mm
Section jambes	600×240 mm
Section pieds	273×180 mm
Section rénale	465×500 mm

Sommier

Hauteur Maximale	1000mm
Hauteur Minimale	700mm

Gamme de mouvements


Reversed Trendelenburg	25°
Trendelenburg	25°
Inclinaison latérale	20°
Mouvements d'arrière en avant	400mm

Réglage des sections

Section tête relevée de l'horizontal	45°
Section tête abaissée de l'horizontal	90°
Section rénale élevée	100mm
Section jambes abaissée de l'horizontal	90°
Section jambes ouverte	90°
Section dos relevée de l'horizontal	70°
Capacité de charge en sécurité	200kg

Accessoires

• Section tête	• Accordoires
• Cadre d'anesthésie	• Repose genoux
• Support du corps	• Coussin
• Supports d'épaules	

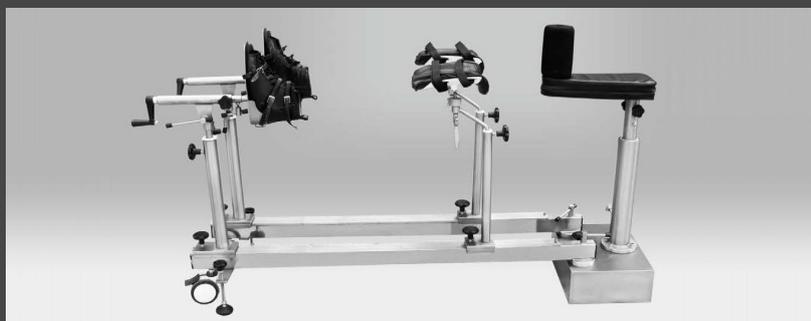

En Option:

Cod. **EST-100159**

8]gdcg]hZ XfYl hYbg]cb

Dci f`Y`hfU]hYa YbhXY`hfUW]cb`ci`cd`ffU]h]cbg`

XYg`Ua`VYg.

NY`gfuXUdhY`dUg`Ui`VfUg`{`7

*Dci f`U`]ghY`Vza`d`,,hY`XYg`UWVggc]fYg`

Yb`cdh]cbz`j`Yi`J`Yn`Vzbgi`hYf`Y`WUJ`c[`i`Y`XfX]f